


IVISKIN

IVISKIN G4 IPL-karvanpoistaja




Käyttöohjeet

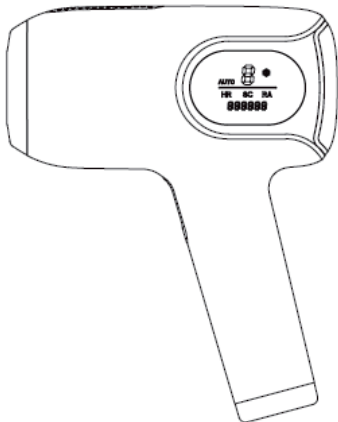



Lue käyttöohjeet ennen laitteen käyttöä.

Sisällysluettelo

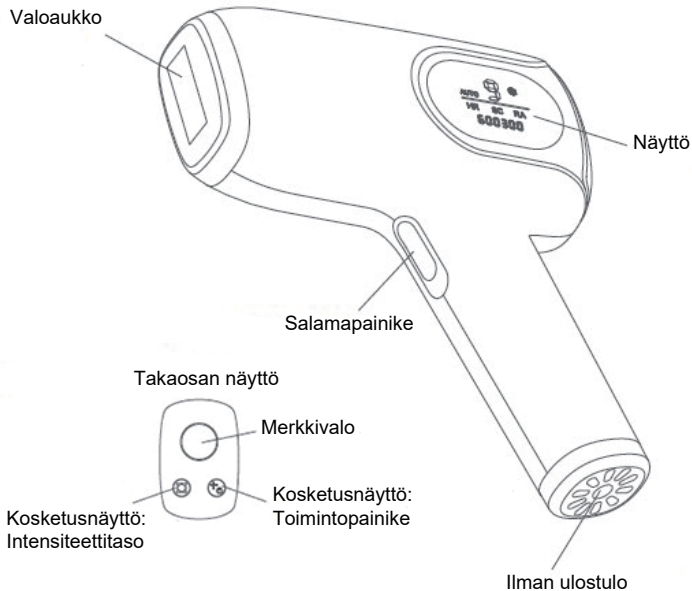1.Painikkeiden ja näytön kuvaukset.....	S.4
2.Ennen laitteen käyttöä.....	S.6
3.Testaaminen ennen käyttöä.....	S.6
4.Miten päästä alkuun ja käyttää IPL-karvanpoistajaa?.....	S.6
5.Suositteltu hoito.....	S.8
6.Missä laitetta voidaan käyttää?.....	S.9
7.Turvallisuusohjeet:.....	S.9
8.Tuote ei sovellu:.....	S.11
9.Vältä IPL:n käyttöä seuraavilla alueilla:.....	S.12
10.Auringolle altistuminen hoidon aikana.....	S.12
11.Vianmääritys.....	S.13

1. Painikkeiden ja näytön kuvaukset:



LCD-näyttö	Toiminto
HR	Karvanpoisto
SC	Ihon uudistaminen
RA	Akne
	IceShield
AUTO	Automaattinen valotila
Taso 1-9	Valon voimakkuus
Kuusi numeroa	Jäljellä oleva valopulssien määrä
	Toimintopainike. Vaihda toimintojen "HR", "SC" ja "RA" välillä. Aktivoi IceShieldin kanssa tai ilman.
 	Kytke laite päälle ja pois päältä pitämällä virtapainiketta painettuna 2 sekunnin ajan. Paina painiketta kerran vaihtaaksesi voimakkuutta. Voit valita jopa 9 tasoa.

2. Ennen laitteen käyttöä:

Tarkista ihotyypiksi ihonvärin tarkistuskuvasta ennen laitteen käyttöä. Älä käytä tätä laitetta, jos sinulla on tumma iho, sillä se voi aiheuttaa iholle haittavaikutuksia, kuten pigmентаatiota, depigmentaatiota, voimakasta punoitusta, turvotusta tai polttavaa tunnetta.



3. Testaaminen ennen käyttöä

Testitapa:

Suosittellemme ihotestin tekemistä 24 tuntia ennen ensimmäistä hoitoa mahdollisten sivuvaikutusten tai reaktioiden varalta. Käytä laitetta pienelle alueelle olkavarren sisäpuolella intensiteettitasoilla 1 ja 5. Jos havaitset punoitusta, palovammoja, kirvelyä tai muita epätavallisia oireita seuraavien 24 tunnin aikana, ota yhteyttä meihin tai käy lääkärissä lisäavun saamiseksi.

4. Miten päästä alkuun ja käyttää IPL-karvanpoistajaa?

- **Valmistele iho:** Poista ensin ihokarvat ajelemalla ne. Jos olet tehnyt vauhauksen, nyppimisen tai epilaation, odota 24 tuntia ennen IPL-laitteen käyttöä. Varmista, että iho on täysin kuiva ja ettei siinä ole öljyä tai rasvoja.
- **Kytke virtalähde:** Kytke pistoke seinään ja käytä tuotteen mukana toimitettuja suojalaseja. Laitteen näyttö syttyy ja näytön tila on "OFF".

- **Kytke laite päälle:** Pidä virtapainiketta painettuna 2 sekunnin ajan. Laite käynnistyy ja vahvistaa nykyisen käyttötilan näytöllä.
- **Oikean voimakkuuden säätäminen:** IPL-laitteessa on voimakkuusasteikko 1–9, jossa 1 on alhaisin voimakkuus ja 9 korkein voimakkuus. Tämän asteikon avulla käyttäjät voivat säätää valopulslien voimakkuutta oman mukavuustasonsa ja ihon herkkyuden mukaan. Kun laitetta käytetään ensimmäistä kertaa, on tärkeää aloittaa alhaisimmalla intensiteettitasolla eli tasolla 1. Tämä auttaa ihoa sopeutumaan vähitellen hoitoon ja antaa sinulle mahdollisuuden arvioida, miten ihosi reagoi valopulsseihin.

Kun totut IPL-karvojenpoistoon, voit vähitellen lisätä intensiteettiä. Yleensä suositellaan, että tehoa nostetaan viikko viikolta, mutta vain jos et koe kipua tai epämukavuutta hoidon aikana.

Henkilöille, joilla on tummempi iho, suositellaan, että he joko välttävät IPL-laitteiden käyttöä kokonaan tai käyttävät niitä pienemmällä intensiteettiasetuksella nostamatta intensiteettiä sivuvaikutusten riskin minimoimiseksi.

- **Valotehon asetukset:**

Manuaalinen tila (sopii pienten alueiden karvanpoistoon). Kun laite kytketään päälle, se käynnistyy oletusarvoisesti manuaaltilassa. Paina salamapainiketta kerran lähettääksesi valoa kerran.

Automaattitila (sopii suurten alueiden karvojen poistoon). Kun laite on kytketty päälle, paina salamapainiketta ja pidä sitä painettuna. Laite siirtyy

automaattitilaan, ja näytössä vilkkuu "AUTO". Kun pidät salamaikkunaa lähellä ihoa, laite vilkkuu automaattisesti.

IceShield-toiminto: Mukavan käyttökokemuksen varmistamiseksi laitteessa on IceShield-ominaisuus. Tämä ominaisuus viilentää ihoa hoidon aikana ja auttaa vähentämään valopulssien lämmön aiheuttamaa epämukavuutta tai ärsytystä. IceShield-toiminto aktivoidaan painamalla lyhyesti laitteen jäähdytyspainiketta. Kun jäähdystoiminto on aktivoitu, näyttöön ilmestyy jäätympisteeseen kuvake, joka osoittaa, että IceShield on käytössä. Jos haluat kytkeä jäähdystoiminnon pois päältä, paina yksinkertaisesti jäähdytyspainiketta uudelleen.

Karvanpoisto, ihon uudistaminen ja aknen hoito: Paina "Toimintopainiketta". Näyttö vaihtuu HR-, SC- ja RA-toimintojen välillä.

- **Hoidon aloittaminen:** Aseta laitteen hoitoikkuna suoraan iholle ja varmista, että se koskettaa ihoa täydellisesti. Jos käytät manuaalista tilaa, paina salamapainiketta aina, kun haluat lähettää valopulssin. Jos käytät automaattitilaa, laite vilkkuu automaattisesti, kun se havaitsee ihokosketuksen. Liikuta laitetta hitaasti ja järjestelmällisesti hoitoalueen yli tasaisen peittävyuden varmistamiseksi, mutta vältä päällekkäisiä välähdyksiä samassa kohdassa. Jatka tätä prosessia, kunnes koko hoitoalue on peitetty. Anna vain yksi valopulssi kutakin aluetta kohti. Ylimääräiset välähdykset samassa kohdassa ovat tarpeettomia.
- **Käytön jälkeen:** Sammuta laite painamalla virtapainiketta pitkään.

5. Suositeltu hoito:

Käytä IPL-laitetta kerran viikossa 12 viikon ajan. Huomaat eron jo 4 viikon kuluttua. 12 viikon kuluttua olet joko tyytyväinen tulokseen ja siirryt lälipitovaiheeseen tai jatkat – tämä vaihtelee yksilöllisesti. Jos päätät jatkaa hoitoa, tee se kerran viikossa, kunnes saavutat haluamasi tulokset.

Ylläpitovaihe:

Ylläpidä tuloksia käyttämällä IPL-laitetta kerran kuukaudessa ensimmäisen hoidon suorittamisesta alkaen.

6. Missä laitetta voidaan käyttää?

IVISKIN IPL-karvanpoistajaa voidaan käyttää koko vartalolla, kunhan se on nenän kärjen alapuolella. Tämän suosituksen tarkoituksena on varmistaa, ettei IPL-valo pääse silmiin hoidon aikana.

Bikinialueella naiset voivat käyttää sitä brasilialaistyyppiseen hoitoon, kunhan peräaukon, limakalvojen ja sisempien häpyhuulten hoitoa vältetään. Miehillä suositellaan, ettei penistä tai kivespussia hoideta. Ympäröivää aluetta voidaan käsitellä.

7. Turvallisuusohjeet:

Nämä varotoimenpiteet ovat yleisiä suosituksia IPL-tekniikan turvalliseen käyttöön kotona. Ne eivät koske ainoastaan meidän malliamme, vaan ne ovat parhaita käytäntöjä, jotka edistävät turvallista ja tehokasta hoitoa.

- Vältä rasvoja tai ihonhoitotuotteita ennen käyttöä, sillä ne voivat tukkia hiustupet, estää valoa pääsemästä juuriin tai aiheuttaa reaktion.
- Älä käytä laitetta kylpyammeessa, suihkussa tai kosketuksissa veden kanssa.

- Säilytä laite kuivassa paikassa ja pidä se poissa suorasta auringonvalosta.
- Jos hoitoalueen iho ei ole kuiva tai puhdas, se voi vaikuttaa tehokkuuteen ja aiheuttaa sen, että laite ei joko vilku tai vilkkuu vahingossa.
- Suosittelemme, että kaikki IPL-karvojenpoistajiemme käyttäjät ovat vähintään 18-vuotiaita. Jos olet alle 18-vuotias, sinulla on oltava vanhempiesi suostumus.
- Jos olet alle 18-vuotias ja sinulla on herkkä iho, ota yhteyttä lääkäriin ennen IPL-käytön aloittamista.
- Tarkista säännöllisesti salamaikkuna lian varalta, jotta vältät palovammoja ja toimintaongelmia käytön aikana.
- Älä tuki tuuletusaukkoja laitteen käytön aikana, sillä se voi aiheuttaa savua tai tulipalon.
- Valitse tehotasoa ihotyypiksi mukaan. Tarkista kohdasta 4D ohjeet alkuun pääsemiseksi.
- Jos huomaat merkkejä ihon ärsytyksestä tai punoituksesta hoidon jälkeen, odota, ennen kuin käytät mitään tuotteita ihollesi, kunnes oireet ovat hävinneet. Jos ärsytys jatkuu tuotteen käytön jälkeen, huuhtelee iho välittömästi vedellä. Jos oireet jatkuvat, lopeta tuotteen käyttö ja ota yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen.
- Tätä tuotetta saa käyttää vain sille tarkoitettuun tarkoitukseen. Noudata käyttöohjeessa annettuja yleisiä turvallisuusohjeita. Vääränlainen käyttö voi aiheuttaa onnettomuuksia, kuten sähköiskuja, palovammoja tai muita niihin liittyviä vammoja.
- Intensiivisen pulssivalon käyttäminen karvojen poistamiseen voi joissakin tapauksissa aiheuttaa päinvastaisen vaikutuksen, joka johtaa karvojen kasvun lisääntymiseen. Tämä on yleisempää Välimeren, Lähi-idän ja tiettyjen muiden etnisten taustojen naisilla.

Tämä ilmiö tunnetaan nimellä "paradoksaalinen hypertrichoosi" tai "

paradoksaalinen karvankasvu”, ja se on harvinaista. On tärkeää huomata, että tummemman ihon omaavilla henkilöillä voi olla erilaisia tuloksia ja mahdollisia sivuvaikutuksia kuin vaaleamman ihon omaavilla henkilöillä, riippumatta käytetystä laitteesta.

- Karvojen ajelun tai muiden toimien aiheuttaman ihoärsytyksen tulisi parantua ennen laitteen käyttöä.
- Älä käytä itseruskettavia voiteita tai minkäänlaista itseruskettavaa hoidon aikana.
- Tätä laitetta ei ole suunniteltu henkilöille, joilla on rajoittuneet fyysiset, aistilliset tai kognitiiviset kyvyt, ellei heitä valvo joku, jolla on siihen tarvittava kokemus.
- Lasten vuorovaikutusta laitteen kanssa on valvottava mahdollisten riskien, kuten valolle altistumisen, sähköisten vaarojen tai muiden laitteen osiin liittyvien mahdollisten vaarojen, välttämiseksi.
- Optimaalisten tulosten saavuttamiseksi pidä kiinni suositellusta hoitovälistä. Liiallinen käyttö varhaisessa vaiheessa voi lisätä ihoon kohdistuvien haittavaikutusten riskiä.
- Jos tarvitset plastiikkakirurgiaa karvojen poiston jälkeen (vain alueella, josta karvat poistettiin), ota yhteyttä lääkäriin.
- Suosittelemme käyttämään hoidon aikana mukana toimitettuja suojalaseja.

8. Tuote ei sovellu:

- Raskaana oleville tai imettäville naisille, kehon arville, diabeetikoille, hauraalte iholle ja valolle herkälle iholle.
- Henkilöille, joilla on vaikea sydänsairaus, kohtalainen tai vaikea korkea verenpaine, pahanlaatuisia kasvaimia, follikuliittia, tarttuvia ihosairauksia, palovammoja ja veren hyytymishäiriöitä.
- Älä käytä sitä, jos sinulla on epänormaali kollageenin aineenvaihdunta,

mukaan lukien aiempia arpia tai huono haavojen paraneminen.

- Älä käytä laitetta alueilla, joilla on herpes simplex -tapauksia, ihovaurioita, hematoomia, suonikohjuja tai suonikohjutautia.
- Henkilöiden, joilla on immuunisairauksia (mukaan lukien HIV, porfyria jne.), ei pidä käyttää laitetta.
- Henkilöiden, joilla on verenvuotohäiriö tai jotka käyttävät isotretinoiinia, hedelmähappoja (AHA), salisyylihappoa (BHA) tai atselaiinihappoa, tulisi välttää laitteen käyttöä.
- Käytä tätä tuotetta varoen, jos olet käyttänyt kemiallista karvanpoistoa viimeisten 30 päivän aikana. Tämä koskee myös niitä, jotka ovat äskettäin käyttäneet ihonvalkaisutuotteita tai A-vitamiinia sisältäviä tuotteita.
- Älä käytä laitetta, jos olet käyttänyt aspiriinia tai immunosuppressiivisia lääkkeitä.

9. Vältä IPL:n käyttöä seuraavilla alueilla:

1. Silmämuna, silmäluomet ja silmien ympärillä olevat alueet.
2. Limakalvot ja peräaukko
3. Alueet, joilla on aknea
4. Tatuoinnit
5. Kulmakarvat
6. Korvat
7. Nännit, nännipinnat
8. Navan sisäpuoli
9. Suuret suonet

(Huomautus: Tämä lista ei ole täydellinen. Jos olet epävarma siitä, voitko käyttää tätä tuotetta, suosittelemme, että otat yhteyttä lääkäriin.)

10. Auringolle altistuminen hoidon aikana

- Suosittelemme odottamaan 48 tuntia hoidon jälkeen ennen rusketumista.
- Jos palat auringossa hoitojakson aikana, odota, että auringonpolttama on parantunut, ennen kuin käytät IPL-laitetta. Suojaa ihosi aina aurinkorasvalla! Käytä SPF 50+ -suojakerrointa hoidetuilla alueilla 48 tunnin ajan hoidon jälkeen ja SPF 30+ -suojakerrointa vähintään kahden viikon ajan hoidon jälkeen.
- Vältä solariumia hoidon aikana.
- Odota rusketuksen jälkeen kaksi viikkoa, ennen kuin käytät Iviskin IPL -karvanpoistolaitetta. Tee testi 24 tuntia ennen hoidon aloittamista (katso kohta 4).

11. Vianmääritys

Tämä osio sisältää yleisimmät ongelmat, joita saatat kohdata tätä laitetta käytettäessä. Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa annettujen tietojen avulla, ota yhteyttä asiakaspalveluun.

<u>Ongelman kuvaus</u>	<u>Mahdolliset syyt</u>	<u>Ratkaisut:</u>
Laturi tai laite lämpenee käytön aikana.	Tämä on normaalia.	Sinun ei tarvitse tehdä mitään.
Asetan karvanpoistolaitteen iholle, ja merkkivalo vilkkuu, mutta jäähdytyspuhallin käynnistyy.	Ylikuumenemissuoja on aktivoitu.	Kun ylikuumenemissuoja on aktivoitu, puhallin jatkaa toimintaansa. Älä sammuta virtaa. Odota, että laite jäähtyy 15 minuuttia ennen käytön jatkamista.

<p>Laite ei vilku, kun salaman painiketta painetaan.</p>	<p>Laite täytyy nollata.</p>	<p>Nollaa laite sammuttamalla ja käynnistämällä se uudelleen.</p>
<p>En voi lisätä tai vähentää intensiteettiä.</p>	<p>Laite täytyy nollata.</p>	<p>Nollaa laite sammuttamalla ja käynnistämällä se uudelleen.</p>
<p>Laite haisee pahalle, kun käytän sitä.</p>	<p>Laitteen sisäpuoli saattaa olla likainen, tai hoitoalueelta ei ole poistettu karvoja kunnolla.</p>	<p>Puhdista laite huolellisesti ja varmista, että poistat iholtasi kaikki karvat ennen sen käyttöä.</p>
<p>Hoidon aikana ihoni tuntuu herkemältä kuin normaalisti tai koen sietämätöntä kipua käyttäessäni laitetta.</p>	<p>Valitsemasi valon intensiteetti on liian korkea.</p>	<p>Varmista, että valon intensiteetti on oikein valittu. Vähennä intensiteettiä tarvittaessa.</p>
	<p>Et ole poistanut kaikkia karvoja hoitoalueelta.</p>	<p>Poista kaikki karvat hoitoalueelta ennen laitteen käyttöä.</p>
	<p>Ulostuloaukon ultraviolettisuodatin on vaurioitunut.</p>	<p>Jos UV-suodatin on vaurioitunut, sinun on lopetettava laitteen käyttö. Ota yhteyttä asiakaspalveluun.</p>

	Olet käyttänyt laitetta väärässä kohdassa.	Älä käytä tätä laitetta seuraavilla alueilla: nännit, nännipiha, häpyhuulet, emätin, peräaukko, kivespussi tai sierainten ja korvien sisäpuoli.
	Laitte ei sovellu ihotyypillesi.	Jos ihotyypiksi on VI, tummanruskea tai hyvin tumma, älä käytä tätä laitetta.
Ihon reaktio kesti kauemmin kuin yleensä hoidon jälkeen.	Valitsemasi valon intensiteetti on liian korkea.	Valitse alhaisempi valon intensiteetti seuraavalla kerralla.
	Valitsemasi valon intensiteetti on liian matala.	Valitse korkeampi valon intensiteetti seuraavalla kerralla.
	Laitte ei tehoa karvojen väriisi.	Sinun tulee poistaa kaikki karvat. On toivottavaa, että seuraat suositeltua hoitomenetelmää.

Jos sinulla on vielä kysyttävää, tutustu blogiimme osoitteessa <https://www.iviskin.fi/blogi/> tai usein kysytyihin kysymyksiimme osoitteessa: <https://www.iviskin.fi/ukk>.

Asiakaspalvelutiimimme vastaa kaikkiin kysymyksiisi chatin tai sähköpostin välityksellä maanantaista perjantaihin kello 10:00-17:00. Jos haluat ottaa meihin yhteyttä, vieraile osoitteessa <https://www.iviskin.fi/asiakaspalvelu/>.

Kun sinun on hävitettävä tuote, älä heitä sitä yleisjätteeseen. Palauta se kierrätysasemalle. Tämä on tärkeää ympäristölle ja meille.

IVISKIN IPL-karvanpoistajan käyttö

6 helppoa vaihetta

1



1. Lue käyttöohjeet ennen käyttöä.

2



2. Ajele käsiteltävä alue karvoista ja kuivaa se hyvin.

3



3. Kytke laite päälle ja valitse oikea voimakkuusaste.

4



4. Aseta valoikkuna tasaisesti ihoa vasten ja aloita hoito.

5



5. Anna laitteen jäähtyä ja puhdista valoikkuna liinalla.

6



6. Levitä hoidetulle alueelle hyvää vartalovoideita.